

誤薬防止支援システム『誤薬チェッカーPro』

クラウドアクセスガイド(薬局編)

本書は製品の近くに置いてご活用ください。誤薬チェッカークラウドアクセスに関する説明をしています。

誤薬チェッカークラウド 2

クラウドホーム 4

CSV ファイル管理 6

薬局システム管理 15

QR コードシート作成 25

システム設定 44

目次

誤薬チェッカークラウド	2
誤薬チェッカークラウドサーバー.....	2
ログイン.....	3
クラウドホーム	4
薬局様クラウドインターフェースメニュー	4
CSV ファイル管理	6
CSV ファイル管理画面.....	6
ID 氏名ファイルのアップロード	7
氏名お食事ファイルのアップロード.....	11
薬局システム管理	15
薬局システム管理概要	15
薬局システム管理メニュー	16
開始/終了桁数設定.....	17
お薬コードの設定（アプリ版数～2.3.6）	19
お薬コードの設定（アプリ版数 2.3.7～）	20
薬局/分包機コードの設定	22
QR コードシート作成	25
QR コード作成方法.....	25
QR コード作成設定画面（新版）	26
QR コード作成設定画面（旧版）	28
QR コード作成例（新版）	29
QR コード作成例（旧版）	40
QR コードの印刷.....	43
システム設定	44
システム設定画面.....	44


誤薬チェッカークラウド

誤薬チェッカーは『クラウド接続』のサーバアクセスに対応しています。

誤薬チェッカークラウドサーバー

アイトシステムが管理するクラウドサーバ（誤薬チェッカークラウド）を利用することで、施設内にサーバを用意しなくても、端末アプリから顔写真の画像ファイルをアップロードや、ダウンロード、ログの送信が可能となります。クラウドのデータには PC やスマホのブラウザからもアクセス可能です。

誤薬チェッカークラウドを用いることでパソコンから簡単に顔写真の管理やログの確認を行うことができます。

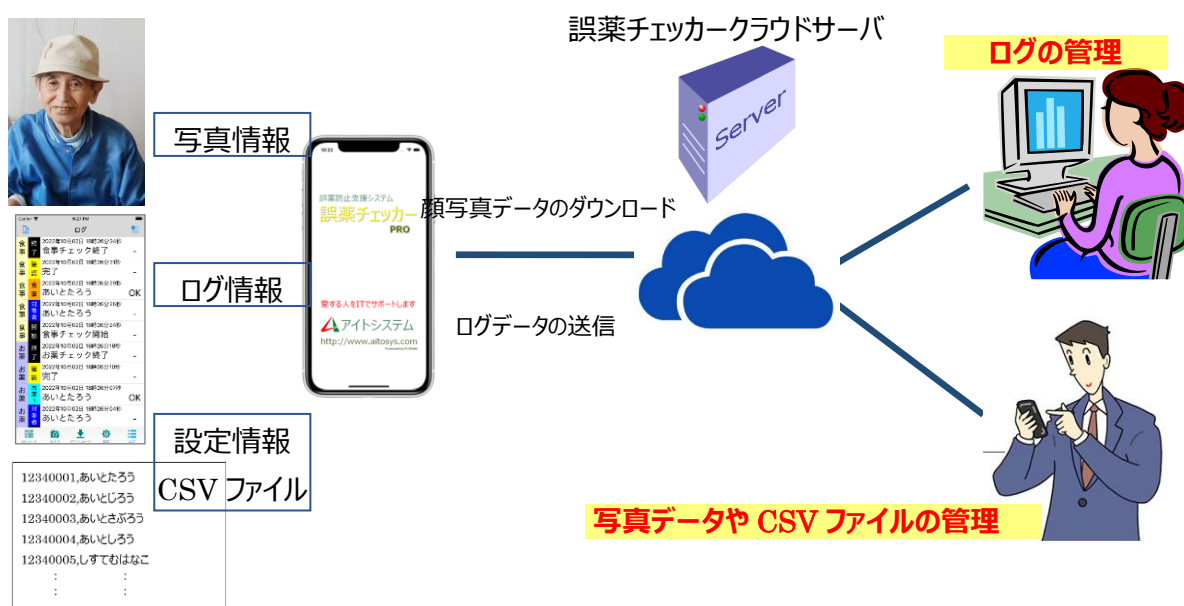

ログイン

施設内にサーバ環境が用意できない場合は、アイトシステムが用意したクラウドサーバを用いることで、端末から写真データのアップロードやダウンロードが行えます。又 PC やスマホでクラウドにログインすることでデータの管理が簡単に行えます。

クラウドの URL アドレスは <https://goyakucheker.aitosys.co.jp/> です。

施設様向けクラウドメニューと薬局様向けクラウドメニューで一部内容が異なります。

ログイン種別で施設様がログインする場合は「**施設様ログイン**」を選択、薬局様がログインする場合は、「**薬局様ログイン**」を選択して、ユーザ ID とパスワードを入力します（ユーザ ID とパスワードは別紙添付資料をご参照ください）。ログインボタンをクリックするとホーム画面が表示されます。

介護施設様は <https://goyakucheker.aitosys.co.jp/index.html?type=care> を、介護施設様は <https://goyakucheker.aitosys.co.jp/index.html?type=pharmacy> を登録しておくでユーザ ID とパスワード入力だけでログイン可能です。

※パスワードはログイン後いつでも自由に変更可能です。

クラウドホーム

誤薬チェッカークラウドのホーム画面です。

薬局様クラウドインターフェースメニュー

薬局様誤薬チェッカークラウドのインターフェースメニューです。



クラウドインターフェースメニューには以下があります。

ホーム

CSV ファイル管理

薬局システム管理

QR コードシート作成

システム設定

ログアウト

ホーム

ログインした時に最初に表示される画面です。クラウドインターフェースメニューのアイコンが表示されます。

CSV ファイル管理

誤訳チェッカーアプリで使用する ID 氏名ファイルや、氏名お食事ファイル等の CSV ファイルの管理を行います。

設定内容に関しては、「CSV ファイル管理」[[6 ページ](#)] を参照下さい。

薬局システム管理

分包機で印字する薬包の QR コードに関する設定を行います。

設定内容に関しては、「CSV ファイル管理」[[15 ページ](#)] を参照下さい。

QR コードシート作成

誤訳チェッカーで使用する、QR コードの印刷用シートの作成を行います。

詳細に関しては、「QR コードシート作成」[[25 ページ](#)] を参照して下さい。

システム設定

パスワードの変更を行う事ができます。

設定内容に関しては、「システム設定」[[44 ページ](#)] を参照下さい。

ログアウト

クリックするとケアシルクラウドからログアウトします。

CSV ファイル管理

誤訳チェッカーアプリで使用する ID 氏名ファイルや、氏名お食事ファイル等の CSV ファイルの管理を行います。

CSV ファイル管理画面

「ID 氏名ファイルのアップロード」、「氏名お食事ファイルのアップロード」のメニューが表示されます。

The screenshot shows a web interface titled "CSVファイル管理". It contains two main sections, each with a blue header bar and a light gray content area. The first section, labeled with a red circle and the number 1, is "ID氏名ファイルのアップロード". Below the header, it says "クラウドにID氏名CSVファイルをアップロードします。" and contains three buttons: "ID氏名ファイルのアップロード", "クラウド内ID氏名ファイル管理", and "ID氏名ファイルの編集". The second section, labeled with a red circle and the number 2, is "氏名お食事ファイルのアップロード". Below the header, it says "クラウドに氏名お食事CSVファイルをアップロードします。" and contains three buttons: "氏名お食事ファイルのアップロード", "クラウド内氏名お食事ファイル管理", and "氏名お食事ファイルの編集".

①ID 氏名ファイルのアップロード


クラウドに ID 氏名 CSV ファイルをアップロードします。クラウドに保存された ID 氏名ファイルの管理や、データの編集をすることもできます。

②氏名お食事ファイルのアップロード

クラウドに氏名お食事 CSV ファイルをアップロードします。クラウドに保存された氏名お食事ファイルの管理やデータの編集をすることもできます。

ID 氏名ファイルのアップロード

クラウド内に保存される ID 氏名ファイルを管理します。

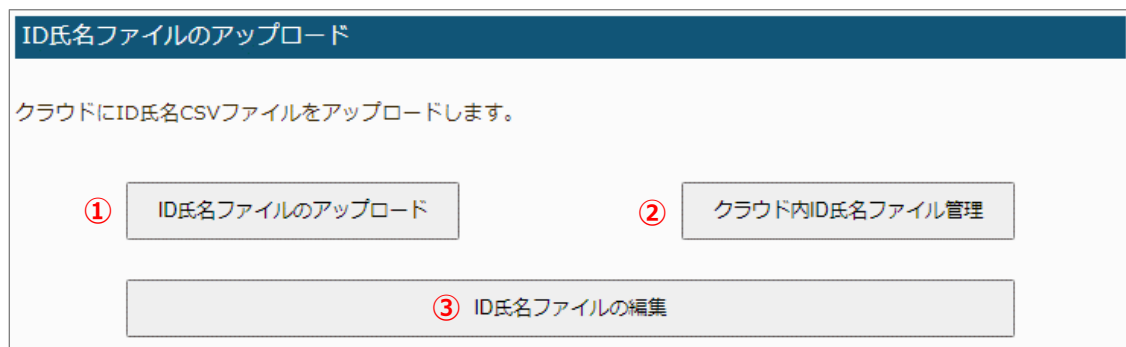

- ① ID 氏名ファイルのアップロード : パソコンやスマホに保存された ID 氏名ファイルをクラウドに転送します。
- ② クラウド内 ID 氏名ファイル管理 : クラウドに保存されている ID 氏名ファイルの名前の変更や削除を行うことができます。
- ③ ID 氏名ファイルの編集 : クラウドに保存されている ID 氏名ファイルの編集を行います

※クラウドの初期セットアップ時には空の（コメントのみの）id_name.csv ファイルが保存されています。

ID 氏名ファイルのアップロード

パソコンやスマホに保存された ID 氏名ファイルをクラウドに転送します。

この画面は「CSVファイル管理」メニュー下の「ID 氏名ファイルのアップロード」です。説明文には「ID 氏名ファイルをクラウドに送信します。ファイルを選択して、『データアップロード確認』ボタンをクリックして下さい」とあります。操作ステップは2つ示されています：① 「ファイルの選択」ボタンをクリックして、パソコンに保存された ID 氏名ファイルを選択します。② 「データアップロード確認」ボタンが有効になるので、クリックします。



この画面は「CSVファイル管理」メニュー下の「ID 氏名ファイルアップロード確認」です。説明文には「ID 氏名ファイルをクラウドに送信します。問題なければ、ファイル送信実行ボタンをクリックして下さい。」とあります。操作ステップは3つ示されています：③ ID 氏名ファイルのアップロード確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、[ファイル送信実行] ボタンをクリックします。

① 「ファイルの選択」 ボタンをクリックして、パソコンに保存された ID 氏名ファイルを選択します。

② 「データアップロード」 確認ボタンが有効になるので、クリックします。

③ ID 氏名ファイルのアップロード確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、[ファイル送信実行] ボタンをクリックします。

完了画面が表示されれば転送完了です。

クラウド内 ID 氏名ファイル管理

クラウドに保存された ID 氏名ファイルの名前を変更や削除を行います。

クラウド内ID氏名ファイル管理

No.	ID氏名ファイル名	新ファイル名	選択
0	id_name.csv		☐
1	id_name_2.csv		☐
2	id_name_3.csv		☐

クラウドに保存されている ID 氏名ファイルの一覧が表示されます。

ID 氏名ファイルの名前を変更する場合

クラウド内ID氏名ファイル管理

No.	ID氏名ファイル名	新ファイル名	選択
0	id_name.csv		☐
1	id_name_2.csv	id_name_2_bak.csv	☒
2	id_name_3.csv		☐

変更する ID 氏名ファイル名のテキストボックスに新しいファイル名を入力し、右端の選択チェックボックスにチェックを入れます。（複数の変更が可能です。）

「選択したファイルの名前の変更」ボタンが有効になるので、クリックします。

クラウド内ID氏名ファイル リネーム確認

選択されたクラウド内ID氏名ファイルの名前を変更します。

よろしければ、リネーム実行ボタンをクリックして下さい。

ID氏名ファイル	リネーム名
id_name_2.csv	id_name_2_bak.csv

クラウド内 ID 氏名 CSV ファイルリネーム確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、**「リネーム実行」** ボタンをクリックします。

完了画面が表示されればリネーム完了です。

ID 氏名ファイルを削除する場合

クラウド内ID氏名ファイル管理

No.	ID氏名ファイル名	新ファイル名	選択
0	id_name.csv		☐
1	id_name_2.csv		☐
2	id_name_3.csv		☒

ID 氏名ファイルの一覧画面で削除するファイル名の選択チェックボックスにチェックを入れます。（複数の変更が可能です。）

「選択したファイルの削除」ボタンが有効になるので、ボタンをクリックします。

クラウド内ID氏名ファイル削除確認

選択されたクラウド内ID氏名ファイルを削除します。

よろしければ、削除実行ボタンをクリックして下さい。

削除ID氏名ファイル
id_name_3.csv

クラウド内 ID 氏名ファイル削除確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、**「削除実行」** ボタンをクリックします。

完了画面が表示されれば削除完了です。

ID 氏名ファイルの編集

クラウドに保存された ID 氏名ファイルのデータを編集することができます。

ID 氏名ファイルの編集

ID 氏名ファイルを編集します。
編集する ID 氏名ファイル名を選択して、値を編集後『データ保存確認』ボタンをクリックして下さい

① 編集する ID 氏名ファイル名

② 区切り文字を含めて編集 ☐ データを保存してから変更して下さい（編集中のデータは破棄されます）

No.			名前	
1	#	コメント ③		
2	#			
3	#			
4		0000000111	,	あいとたろう
5		0000000112	,	あいとしろう
6		0000000113	,	ゆやまたろう
7		0000000114	,	ゆやまじろう
8		0000000115	,	しすてむはなこ
9	④	0000000116	,	あいとはなこ ⑤
10		0000000117	,	しらとりれいこ
11		0000000118	,	やまだたろう
12		0000000119	,	きしだふみお
13		0000000120	,	あいとさぶろう

前画面に戻る ⑥ データ保存確認

- ① クラウドに保存されている ID 氏名ファイルから、編集する ID 氏名ファイルを選択します。
- ② チェックを入れることで 1 行毎のデータを編集できる画面に切り替わります。編集中のデータは破棄されるので、切り替え前にデータを保存しておいて下さい。
- ③ コメント行がある場合に表示されます。コメント行はデータとして認識されません。
- ④ ID を入力します。英数字が入力可能です。
- ⑤ 名前データを入力します。
- ⑥ データの更新があった場合にボタンが有効になります。データを保存する場合はボタンをクリックします。

「区切り文字を含めて編集」が有効な場合

ID氏名ファイルの編集

ID氏名ファイルを編集します。
編集するID氏名ファイル名を選択して、値を編集後『データ保存確認』ボタンをクリックして下さい

編集するID氏名ファイル名

id_name.csv

区切り文字を含めて編集

☒ データを保存してから変更して下さい（編集中のデータは破棄されます）

No.	ID, 氏名
1	0000000111,あいとたろう
2	0000000112,あいとじろう
3	0000000113,ゆやまたろう
4	0000000114,ゆやまじろう
5	0000000115,しすてむはなこ
6	0000000116,あいとはなこ
7	0000000117,しらとりれいこ
8	0000000118,やまだたろう
9	0000000119,きしだふみおa

前画面に戻る

データ保存確認

先頭行から連続する行の最初の一文字目に # を入れることでコメント行とすることができます。コメント行は、データとして認識されません。

ID氏名ファイルの編集

ID氏名ファイルを編集します。
編集するID氏名ファイル名を選択して、値を編集後『データ保存確認』ボタンをクリックして下さい

編集するID氏名ファイル名

id_name.csv

区切り文字を含めて編集

☒ データを保存してから変更して下さい（編集中のデータは破棄されます）

No.	ID, 氏名
1	#
2	# コメント
3	#
4	0000000111,あいとたろう
5	0000000112,あいとじろう
6	0000000113,ゆやまたろう
7	0000000114,ゆやまじろう
8	0000000115,しすてむはなこ
9	0000000116,あいとはなこ
10	0000000117,しらとりれいこ
11	0000000118,やまだたろう
12	0000000119,きしだふみお
13	0000000120,あいとさぶろう

前画面に戻る

データ保存確認

氏名お食事ファイルのアップロード

クラウド内に保存される氏名お食事ファイルを管理します。

氏名お食事ファイルのアップロード

クラウドに氏名お食事CSVファイルをアップロードします。

① 氏名お食事ファイルのアップロード ② クラウド内氏名お食事ファイル管理

③ 氏名お食事ファイルの編集

- ①氏名お食事ファイルのアップロード : パソコンやスマホに保存された ID 氏名ファイルをクラウドに転送します。
- ②クラウド内 ID 氏名ファイル管理 : クラウドに保存されている ID 氏名ファイルの名前の変更や削除を行うことができます。
- ③氏名お食事ファイルの編集 : クラウドに保存されている ID 氏名ファイルの編集を行います

※クラウドの初期セットアップ時には空の（コメントのみの）name_meal.csv ファイルが保存されています。

氏名お食事ファイルのアップロード

パソコンやスマホに保存された氏名お食事ファイルをクラウドに転送します。

氏名お食事ファイルのアップロード

氏名お食事ファイルをクラウドに送信します。ファイルを選択して、『データアップロード確認』ボタンをクリックして下さい

氏名お食事ファイル ① ファイルの選択 name_meal.csv

②

前画面に戻る データアップロード確認



氏名お食事ファイルアップロード確認

氏名お食事ファイルをクラウドに送信します。問題なければ、ファイル送信実行ボタンをクリックして下さい。

氏名お食事ファイル name_meal.csv

前画面に戻る ③ ファイル送信実行

- ① [ファイルの選択] ボタンをクリックして、パソコンに保存された氏名お食事ファイルを選択します。

- ② [データアップロード] 確認ボタンが有効になるので、クリックします。

- ③氏名お食事ファイルのアップロード確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、[ファイル送信実行] ボタンをクリックします。

完了画面が表示されれば転送完了です。

クラウド内氏名お食事ファイル管理

クラウドに保存された氏名お食事ファイルの名前を変更や削除を行います

クラウド内氏名お食事ファイル管理

No.	氏名お食事ファイル名	新ファイル名	選択
0	name_meal.csv		☐
1	name_meal1.csv		☐
2	name_meal2.csv		☐

クラウドに保存されている氏名お食事ファイルの一覧が表示されます。

氏名お食事ファイルの名前を変更する場合

クラウド内氏名お食事ファイル管理

No.	氏名お食事ファイル名	新ファイル名	選択
0	name_meal.csv		☐
1	name_meal1.csv	name_meal1_bak.csv	☒
2	name_meal2.csv		☐

変更する氏名お食事ファイル名のテキストボックスに新しいファイル名を入力し、右端の選択チェックボックスにチェックを入れます。（複数の変更が可能です。）

「選択したファイルの名前の変更」ボタンが有効になるので、クリックします。

クラウド内氏名お食事ファイル リネーム確認

選択されたクラウド内氏名お食事ファイルの名前を変更します。

よろしければ、リネーム実行ボタンをクリックして下さい。

氏名お食事ファイル	リネーム名
name_meal1.csv	name_meal1_bak.csv

クラウド内 氏名お食事ファイルリネーム確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、**「リネーム実行」**ボタンをクリックします。

完了画面が表示されればリネーム完了です。

氏名お食事ファイルを削除する場合

クラウド内氏名お食事ファイル管理

No.	氏名お食事ファイル名	新ファイル名	選択
0	name_meal.csv		☐
1	name_meal1.csv		☒
2	name_meal2.csv		☒

氏名お食事ファイルの一覧画面で削除するファイル名の選択チェックボックスにチェックを入れます。（複数の変更が可能です。）

「選択したファイルの削除」ボタンが有効になるので、ボタンをクリックします。

クラウド内氏名お食事ファイル削除確認

選択されたクラウド内氏名お食事ファイルを削除します。

よろしければ、削除実行ボタンをクリックして下さい。

削除氏名お食事ファイル
name_meal1.csv
name_meal2.csv

クラウド内氏名お食事ファイル削除確認画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ、**「削除実行」**ボタンをクリックします。

完了画面が表示されれば削除完了です。

氏名お食事ファイルの編集

クラウドに保存された氏名お食事ファイルのデータを編集することができます。

氏名お食事CSVファイルの編集

氏名お食事ファイルを編集します。
編集する氏名お食事ファイル名を選択して、値を編集後『データ保存確認』ボタンをクリックして下さい

① 編集する氏名お食事ファイル名

name_meal.csv ▼

② 区切り文字を含めて編集

☐ データを保存してから変更して下さい（編集中のデータは破棄されます）

No.	名前	,	食事
1	#		コメント ③
2	#		
3	#		
4			あいとたろう , 普通食
5			あいとじろう , 糖尿病食
6			ゆやまたろう , 普通食
7			ゆやまじろう , 普通食
8	④		しすてむはなこ , 減塩食 ⑤
9			あいとはなこ , 普通食
10			しらとりれいこ , 糖尿病食
11			やまだたろう , 普通食
12			きしだふみお , 普通食

前画面に戻る

⑥ データ保存確認

- ① クラウドに保存されている氏名お食事ファイルから、編集する氏名お食事ファイルを選択します。
- ② チェックを入れることで 1 行毎のデータを編集できる画面に切り替わります。編集中のデータは破棄されるので、切り替え前にデータを保存しておいて下さい。
- ③ コメント行がある場合に表示されます。コメント行はデータとして認識されません。
- ④ 名前データを入力します。
- ⑤ 食事種別を入力します。
- ⑥ データの更新があった場合にボタンが有効になります。データを保存する場合はボタンをクリックします。

「区切り文字を含めて編集」が有効な場合

氏名お食事CSVファイルの編集

氏名お食事ファイルを編集します。
編集する氏名お食事ファイル名を選択して、値を編集後『データ保存確認』ボタンをクリックして下さい

編集する氏名お食事ファイル名

name_meal.csv

区切り文字を含めて編集

☒ データを保存してから変更して下さい（編集中のデータは破棄されます）

No.	氏名, お食事
1	あいとたろう, 普通食
2	あいとじろう, 糖尿病食
3	ゆやまたろう, 普通食
4	ゆやまじろう, 普通食
5	しすてむはなこ, 減塩食
6	あいとはなこ, 普通食
7	しらとりれいこ, 糖尿病食
8	やまだたろう, 普通食
9	きしたふみお, 普通食

前画面に戻る

データ保存確認

先頭行から連続する行の最初の一文字目に # を入れることでコメント行とすることができます。コメント行は、データとして認識されません。

氏名お食事CSVファイルの編集

氏名お食事ファイルを編集します。
編集する氏名お食事ファイル名を選択して、値を編集後『データ保存確認』ボタンをクリックして下さい

編集する氏名お食事ファイル名

name_meal.csv

区切り文字を含めて編集

☒ データを保存してから変更して下さい（編集中のデータは破棄されます）

No.	氏名, お食事
1	#
2	# コメントです
3	#
4	あいとたろう, 普通食
5	あいとじろう, 糖尿病食
6	ゆやまたろう, 普通食
7	ゆやまじろう, 普通食
8	しすてむはなこ, 減塩食
9	あいとはなこ, 普通食
10	しらとりれいこ, 糖尿病食
11	やまだたろう, 普通食
12	きしたふみお, 普通食

前画面に戻る


データ保存確認

薬局システム管理

分包機で印字される QR コードの読み取り設定管理を行います。（薬局様ログイン ID のみ有効）

薬局システム管理概要

分包機で印字される QR コードの読み取りの場合、QR コードデータのフォーマット情報や用法（お薬）コードを誤薬チェッカーアプリに設定する必要があります。これらの情報は、薬局様で管理されるもので、その設定値をひとつひとつ、施設様に伝達するのは大変です。薬局様で管理している QR コード設定情報をクラウドに設定することで、施設様ではボタン一つでダウンロード可能です。

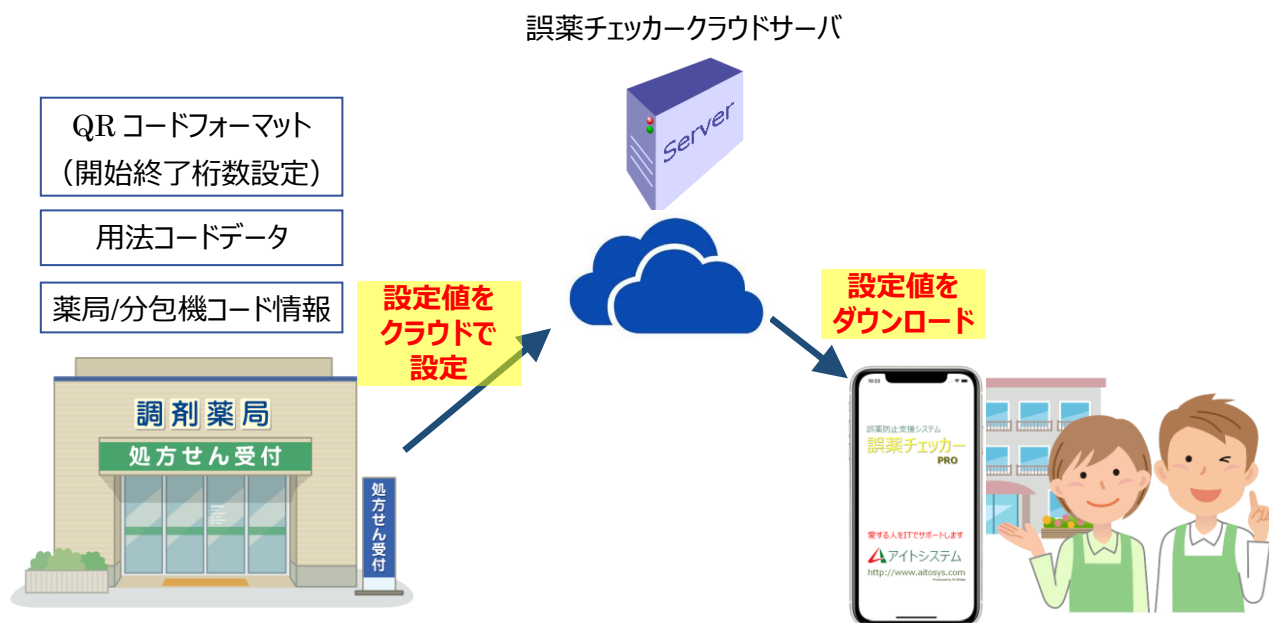

クラウドで設定できる薬局様の QR コード情報には以下のものがあります。

- (1) QR コードフォーマットデータ（開始／終了桁数設定）
- (2) 用法（お薬）コードデータ
- (3) 薬局／分包機コードデータ

※薬局システム管理機能は端末アプリ版数 2.3.1 以上で有効となります。

薬局システム管理

① 開始/終了桁数設定

分包機で印字されたQRコードの読み取り桁数を設定します。端末アプリ版数2.3.7以降は、薬局コードと分包機コードを設定可能です。

開始/終了桁数設定 (アプリ版数～2.3.6)

開始/終了桁数設定 (アプリ版数2.3.7～)

※この機能は端末アプリ版数2.3.1以降で有効となります。

② お薬コードの設定

分包機で印字されたQRコードのお薬コードを設定します。端末アプリ版数2.3.7以降は、最大8個まで追加のコードを設定できます。

お薬コードの設定 (アプリ版数～2.3.6)

お薬コードの設定 (アプリ版数2.3.7～)

※この機能は端末アプリ版数2.3.1以降で有効となります。

③ 薬局/分包機コードの設定

分包機で印字されたQRコードの薬局/分包機コードを設定します。端末アプリ版数2.3.7以降は、薬局コードを設定できます。又薬局コード/分包機コードに文字を許容する設定を行うことで英字だけでなく、「J」(半角カンマ)を含めることができます。

薬局コードの設定 (アプリ版数～2.3.6)

薬局コードの設定 (アプリ版数2.3.7～)

※この機能は端末アプリ版数2.3.1以降で有効となります。

※薬局/分包機コードのダウンロード機能は
端末アプリ版数 2.3.1 版以降での対応と
なります。

開始/終了桁数設定

分包機で印字される薬包の QR コードデータフォーマットを設定します。読み取り方法には桁数を定義することで、対象のデータを読み取る方法と、区切り文字によって区切られたデータを読み取る方法があります。『桁数を定義する』場合は、読み取る項目の開始桁と終了桁を定義します。

QRコードの開始/終了桁数の設定

分包機で印字されたQRコードの読み取り桁数を設定します。

読取方法: 桁数を定義する

区切り文字:

項目	① 開始桁	② 終了桁	③ 有効
ID	1	10	☒
日付年	12	15	☒
日付月	17	18	
日付日	20	21	
お薬コード	23	26	☒
薬局コード	28	29	☐

アプリ版数 2.3.7 版以降では、「分包機コード」が追加されています。

前画面に戻る

データ保存確認 ④

- ①開始桁 : 設定項目の開始桁数を設定します。
- ②終了桁 : 設定項目の終了桁数を設定します。日付年は 1 桁～ 4 桁に対応しています。
- ③有効 : 読み取り対象とする場合にチェックボックスにチェックを入れます。
- ④データ保存確認 : 設定されたデータを保存する確認画面を表示します。

上記の設定は、以下のような QR コードデータの場合です。

服薬対象者の ID 情報

服薬対象日

お薬コード

0000000113,2022/03/01,0068

↑

桁数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

区切り文字列で読み取る場合は、読み取る項目の区切り桁（番号）を定義します。区切り文字は、半角カンマ（ , ）と半角空白を選択することができます。それ以外の区切り文字を使用する場合は、区切り文字の項目に区切り文字を定義します。

QRコードの開始/終了桁数の設定

分包機で印字されたQRコードの読み取り桁数を設定します。

読取方法: (半角)区切り文字列		区切り文字: ,	
項目	① 区切桁	② 日付フォーマット	③ 有効
ID	1		☒
日付	2	yyyy/mm/dd ▼	☒
お薬コード	3		☒
薬局コード	4		☐

アプリ版数 2.3.7 版以降では、「分包機コード」が追加されています。

前画面に戻る
データ保存確認 ④

- ①区切桁 : 設定項目の開始桁数を設定します。
- ②日付フォーマット : 日付のフォーマットを設定します。自動設定にすると日付を自動で判定します。
- ③有効 : 読み取り対象とする場合にチェックボックスにチェックを入れます。
- ④データ保存確認 : 設定されたデータを保存する確認画面を表示します。

上記の設定は、以下のような QR コードデータの場合です。

服薬対象者の ID 情報	服薬対象日	お薬コード
0000000113,2022/03/01,0068		
	↑	↑
区切り桁	1 番目	2 番目
		↑
		3 番目

お薬コードの設定（アプリ版数～2.3.6）

服薬タイミングを規定するお薬（用法）コードを定義します。最大 79 個のお薬（用法）を登録可能です。
No 1 ～ 15 のお薬（用法）種別は固定（システム予約）です。

お薬コードの設定

分包機で印字されたQRコードのお薬コードを設定します。

前画面に戻る

データ保存確認

No.	① 有効	② お薬種別	③ お薬コード	④ 頓服 設定	⑤ 分包機 設定	⑥ 薬局名	⑦ 分包機名
1	☒	朝食前	0201	☐	☐	薬局 1	分包機 1
2	☒	朝食後	0202	☐	☐	薬局 1	分包機 1
3	☒	朝食間	0203	☒	☐	薬局 1	分包機 1
4	☒	昼食前	0301	☐	☐	薬局 1	分包機 1
5	☒	昼食後	0302	☐	☐	薬局 1	分包機 1
6	☒	昼食間	0303	☐	☒	薬局 1	分包機 1
7	☒	夕食前	0401	☐	☐	薬局 1	分包機 1
8	☒	夕食後	0402	☐	☐	薬局 1	分包機 1
9	☒	夕食間	0403	☐	☐	薬局 1	分包機 1
10	☒	起床後	0503	☐	☐	薬局 1	分包機 1
11	☒	就寝前	0501	☐	☐	薬局 1	分包機 1
12	☒	定時 1	0601	☐	☐	薬局 1	分包機 1
13	☒	定時 2	0602	☐	☐	薬局 1	分包機 1

- ①有効 : お薬コードを有効とする場合にチェックボックスにチェックを入れます。No1～No15 は有効となっており、変更できません。No16 以降を設定します。
- ②お薬種別 : 設定するお薬種別を選択します。複数の同一種別を設定できますが、お薬コードを異なる値に設定して下さい。
- ③お薬コード : お薬（用法）コードを入力します。分包機設定が無効の場合は、お薬コードが重複しないようにして下さい。
- ④頓服設定 : 頓服（頓用）薬に設定する場合、チェックを入れます。
- ⑤分包機設定 : 分包機コードの判定を行う場合、チェックを入れます。分包機コードを含む QR コードの場合、対応する薬局名と分包機名の比較を行います。
- ⑥薬局名 : 分包機コードを含む QR コードの場合、対応する薬局名の判定を行います。
- ⑦分包機名 : 分包機コードを含む QR コードの場合、対応する分包機名の判定を行います。

お薬コードの設定（アプリ版数 2.3.7～）

服薬タイミングを規定するお薬（用法）コードを定義します。最大 79 個のお薬（用法）を登録可能です。
No 1 ～ 15 のお薬（用法）種別は固定（システム予約）です。

お薬コードの設定

①

②

前画面に戻る

分包機で印字されたQRコードのお薬コードを設定します。

No.	お薬種別	基本	追加 1	追加 2	追加 3	追加 4	追加 5	追加 6	追加 7	追加 8	設定 ③
1	朝食前										詳細設定
2	朝食後										詳細設定
3	朝食間										詳細設定
4	昼食前										詳細設定
5	昼食後										詳細設定
6	昼食間			P							詳細設定
7	夕食前				M						詳細設定
8	夕食後										詳細設定
9	夕食間							PM			詳細設定
10	起床後										詳細設定

77

未定義

詳細設定

78

未定義

詳細設定

79

未定義

詳細設定

お薬コードに文字を許容する

☐

④

前画面に戻る

⑤

お薬コードに文字を許容する設定保存確認

①お薬種別

設定するお薬種別が表示されます。
No1～No15 は固定のお薬種別となっており、種別名は変更できません。追加する場合は、No16 以降を設定します。

②設定状態

設定状態を示します。有効になっている場合は、背景が白色になり、無効の場合はグレーになります。頓服薬設定されている場合は、背景が青色で表示されます。薬局コードが設定されている場合は、「P」の文字が表示され、分包機コードが設定されている場合は、「M」の文字が表示されます。薬局コードと分包機コードの両方が設定されている場合は、「PM」の文字が表示されます。

③詳細設定ボタン

お薬種別の設定を行います。

④お薬コードに文字を許容する設定

お薬コードは通常数字で表現されますが、数字以外の文字を使用する場合は、このチェックボックスを設定します。

⑤お薬コードに文字を許容する設定保存確認ボタン

お薬コードに文字を許容する設定を保存する場合このボタンをクリックします。

お薬コードの詳細設定

お薬コードの設定（アプリ版数 2.3.7～）画面で **詳細設定** ボタンをクリックすると、お薬コードの詳細設定画面が表示されます。お薬種別毎に最大 9 個のコード設定が可能です。

お薬コードの詳細設定

分包機で印字されたQRコードのお薬コードを設定します。

No.2	お薬種別: 朝食後	お薬コードの数字以外使用:				許容しない	
種別	有効	お薬コード	頓服	薬局	分包機	薬局名	分包機名
基本	☒	0202	☐	☐	☐	薬局 1	分包機 1
追加 1	☐		☐	☐	☐	薬局 1	分包機 1
追加 2	☐		☐	☐	☐	薬局 1	分包機 1
追加 3	☐		☐	☐	☐	薬局 1	分包機 1
追加 4	☐		☐	☐	☐	薬局 1	分包機 1
追加 5	☐		☐	☐	☐	薬局 1	分包機 1
追加 6	☐		☐	☐	☐	薬局 1	分包機 1
追加 7	☐		☐	☐	☐	薬局 1	分包機 1
追加 8	☐		☐	☐	☐	薬局 1	分包機 1

※追加 1～8 設定を有効にする場合は、基本設定を有効にしてください。

前画面に戻る

データ保存確認

- ①お薬種別 : 設定するお薬種別を選択します。複数の同一種別を設定できますが、お薬コードを異なる値に設定して下さい。
- ②有効 : お薬コードを有効とする場合にチェックボックスにチェックを入れます。No1～No15 の基本設定は有効となっており、変更できません。同じお薬種別で異なるお薬がある場合は、追加 1～8 に設定します。
- ③お薬コード : お薬（用法）コードを入力します。薬局/分包機設定が無効の場合は、お薬コードが重複しないようにして下さい。
- ④頓服設定 : 頓服（頓用）薬に設定する場合、チェックを入れます。
- ⑤薬局設定 : 薬局コードの判定を行う場合、チェックを入れます。薬局コードを含む QR コードの場合、対応する薬局名の比較を行います。
- ⑥分包機設定 : 分包機コードの判定を行う場合、チェックを入れます。分包機コードを含む QR コードの場合、対応する分包機名の比較を行います。
- ⑦薬局名 : 薬局コードを含む QR コードの場合、対応する薬局名の判定を行います。
- ⑧分包機名 : 分包機コードを含む QR コードの場合、対応する分包機名の判定を行います。
- ⑨データ保存確認 : 設定されたデータを保存する確認画面を表示します。

薬局/分包機コードの設定

分包機コードを含む QR コードに対応する薬局/分包機を示すコードを定義します。

薬局 1 ～ 4 に対応しています。薬局の分包機コード設定ボタンをクリックすることで分包機コードを設定できます。

薬局 1 の分包機コード設定

薬局 1 の分包機で印字されたQRコードの分包機コードを設定します。

① 薬局 1 の分包機コード設定

薬局 2 の分包機コード設定

薬局 2 の分包機で印字されたQRコードの分包機コードを設定します。

薬局 2 の分包機コード設定

...

薬局 4 の分包機コード設定

薬局 4 の分包機で印字されたQRコードの薬局/分包機コードを設定します

薬局 4 の分包機コード設定

薬局コードと分包機コードの文字許可

薬局コードと分包機コードの文字許可を設定します

薬局コードに文字を許可する	☐	②
分包機コードに文字を許可する	☐	③

前画面に戻る ④ 薬局／分包機コードに文字を許可する設定保存確認

① 薬局 1 の分包機コード設定ボタン

薬局 1 の薬局コードと分包機コードを設定します。

② 薬局コードに文字を許可する

薬局コードは通常数字で表現されますが、数字以外の文字を使用する場合は、このチェックボックスを設定します。

③ 分包機コードに文字を許可する

分包機コードは通常数字で表現されますが、数字以外の文字を使用する場合は、このチェックボックスを設定します。

④ 薬局/分包機コードに文字を許可する設定保存確認ボタン

薬局コードもしくは分包機コードに文字を許可する設定を変更した場合、設定値を保存する場合にこのボタンをクリックします。

薬局 1 ～ 4 の分包機コード設定（アプリ版数～2.3.6）

薬局 1 ～ 4 毎に 4 つの分包機コードを定義できます。

薬局 1 の分包機コード設定

薬局 1 の分包機で印字されたQRコードの分包機コードを設定します。

薬局名	①	あいと薬局
No.	② 有効	③ 分包機コード
分包機 1	☒	11
分包機 2	☒	12
分包機 3	☒	13
分包機 4	☒	14

前画面に戻る

データ保存確認 ④

- ①薬局名 : 薬局名を定義します。
- ②有効 : 分包機コードを有効とする場合にチェックボックスにチェックを入れます。
- ③分包機コード : 分包機コードを入力します。有効となる分包機コードは全ての薬局の分包機コードでユニークな値となるようにしてください。
- ④データ保存確認 : 設定されたデータを保存する確認画面を表示します。

薬局 1 ～ 4 の分包機コード設定（アプリ版数 2.3.7～）

薬局 1 ～ 4 毎に 4 つの分包機コードを定義できます。

薬局1の分包機コード設定

薬局コードに文字を許容

無効

分包機コードに文字を許容

無効

薬局名

①

薬局1

薬局コード

②

1111

No.

③

有効

④

分包機コード

分包機 1

☒

11

分包機 2

☐

12

分包機 3

☐

13

分包機 4

☐

14

前画面に戻る

データ保存確認 ⑤


- ①薬局名 : 薬局名を定義します。
- ②薬局コード : 薬局コードを定義します。通常数字で表現されますが、「薬局コードに文字を許容する」オプションが有効な場合は、数字以外の文字を使用できます。
- ③有効 : 分包機コードを有効とする場合にチェックボックスにチェックを入れます。
- ④分包機コード : 分包機コードを入力します。有効となる分包機コードはユニークとなる数字を設定します。通常数字で表現されますが、「分包機コードに文字を許容する」オプションが有効な場合は、数字以外の文字を使用できます。
- ⑤データ保存確認 : 設定されたデータを保存する確認画面を表示します。

QR コードシート作成

誤訳チェッカーシステムで使用する QR コードの印刷用シートを作成します。

QR コード作成方法

クラウド画面で作成した QR コードイメージをプリンタでシール台紙に印刷して作成します。

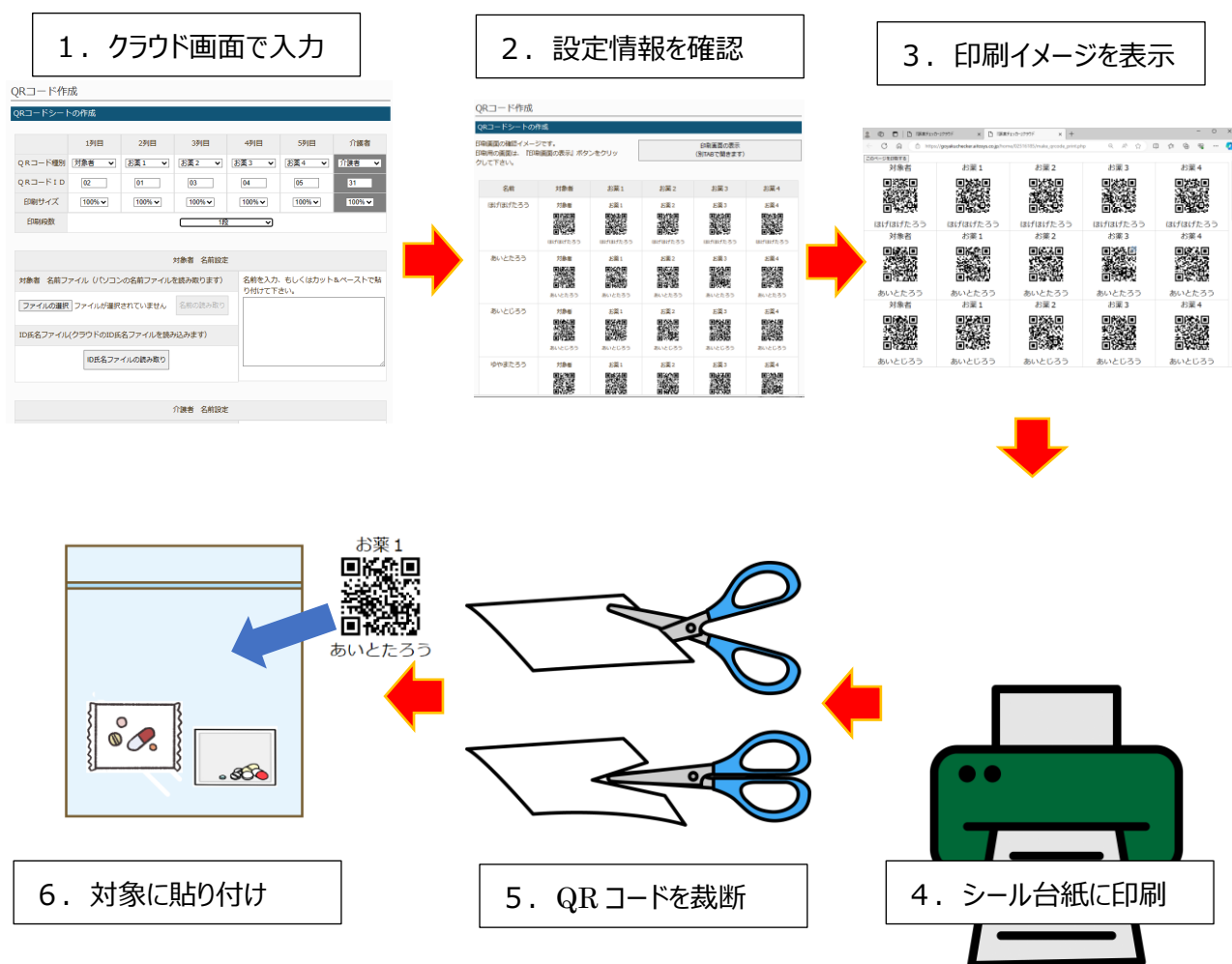

1. クラウド画面で印刷する QR コードの設定を行い、[QR コードシートの作成] ボタンをクリックします。
2. 表示された画面から、印刷する QR コードの出力内容を確認し [印刷画面の表示] ボタンをクリックします。
3. 印刷イメージが表示されます。内容を確認し、問題なければ [このページを印刷する] ボタンをクリックします。
4. プリンタの設定に従ってシール台紙に印刷します。
5. 印刷されたシートを裁断し、QR コードのシールを作成します。
6. 作成した QR コードシールを対象に張り付けます。

QRコード作成設定画面（新版）

QRコードの出力方法と作成する対象者の名前を設定します。

The screenshot shows the 'QRコードシートの作成' (QR code sheet creation) screen. It is divided into several sections:

- 設定値保存/読み出し** (Save/Load settings): Located at the top right, with buttons for '設定値の保存' (Save settings) and '設定値の読み出し' (Load settings).
- 出力設定** (Output settings): A section on the left containing settings for '印刷段数' (Number of printed lines), 'QRコード種別' (QR code type), and '印刷サイズ' (Print size) for multiple rows (1 to 6).
- 対象者名入力設定** (Patient name input settings): A section in the middle right for setting patient names, with options for 'ファイルの選択' (Select file) and 'ID氏名ファイルの読み取り' (Load ID name file).
- 介護者名入力設定** (Caregiver name input settings): A section below the patient name settings for setting caregiver names.
- 薬包印刷 QRコード設定** (Medication pack printing QR code settings): A section at the bottom for setting output items like '日付フォーマット' (Date format), '薬局コード' (Pharmacy code), and '分包機コード' (Packaging machine code).

出力設定

異なる6つの（列の）QRコードを印刷することができます。

- ・印刷段数：
出力する QR コードの表示段数を設定します。
- ・QRコード種別：
出力する QR コードの種別を選択します。
以下の項目が選択できます。

- ・印刷しない
- ・薬包（分包機で印刷された QR コード）
- ・対象者
- ・お薬 1～4
- ・食事
- ・介護者
- ・（ユーザ）定義 1～4

薬包を選択すると、画面下部に「薬包印刷 QRコード設定」画面が表示され、出力項目設定の選択状況に従い、「日付」、「用法コード」、「薬局コード」、「分包機コード」が表示されます。

- ・印刷サイズ：
QRコードの大きさを設定します。割合は絶対値ではなく、相対値を示します。
- ・日付：
薬包印刷時の出力項目設定で「日付」を有効にした場合表示されます。QRコードに含める日付情報を設定します。
- ・用法コード：
薬包印刷時の出力項目設定で「用法コード」を有効にした場合表示されます。QRコードに含める用法コード情報を設定します。
- ・薬局コード：
薬包印刷時の出力項目設定で「薬局コード」を有効にした場合表示されます。QRコードに含める薬局コード情報を設定します。

- ・分包機コード：

薬包印刷時の出力項目設定で「分包機コード」を有効にした場合表示されます。QR コードに含める分包機コード情報を設定します。

設定値保存/読み出し

- ・設定値保存ボタン：表示されている設定状態を保存します。
- ・設定値読出ボタン：保存されている設定値を読み出し、画面に反映します。

対象者名入力設定

- ・対象者名前ファイルからの読み取り：名前を改行区切りで記述したテキストファイルから読み取ります。
- ・ID 氏名ファイルからの読み取り：クラウドに保存されている ID 氏名ファイルから名前を取り込みます。
- ・名前の直接入力：Web 画面に直接名前を記述します（カット＆ペーストも可）。

※最終行の名前には[Enter]キーを押して改行を入力して下さい。

対象者名入力設定

- ・介護者名前ファイルからの読み取り：名前を改行区切りで記述したテキストファイルから読み取ります。
- ・名前の直接入力：Web 画面に直接名前を記述します（カット＆ペーストも可）。

※最終行の名前には[Enter]キーを押して改行を入力して下さい。

薬包印刷 QR コード設定

QR コード種別で 1 つでも「薬包」を選択すると薬包印刷 QR コード設定が表示されます。

- ・出力項目設定：薬包 QR コードに「日付」、「用法コード」、「薬局コード」、「分包機コード」を含めるかの設定を行います。
- ・日付フォーマット：薬包 QR コードに出力する日付のフォーマットを選択します。年月日の区切りに「/」を入れる「yyyy/mm/dd」と区切りを入れない「yyyymmdd」の形式が選択できます。
- ・日付設定方法：日付の入力方法を選択します。カレンダーから選択する方法と直接日付を入力する方法から選択できます。
- ・用法設定方法：用法コードの入力方法を選択します。お薬種別と追加設定から選択する方法と、用法コードを直接入力する方法から選択できます。
- ・薬局設定方法：薬局コードの入力方法を選択します。薬局名から選択する方法と、薬局コードを直接入力する方法から選択できます。
- ・分包機設定方法：分包機コードの入力方法を選択します。薬局名の分包機種別から選択する方法と、分包機コードを直接入力する方法から選択できます。

QRコード作成設定画面（旧版）

QRコードの出力方法と作成する対象者の名前を設定します。

QRコード作成

QRコードシートの作成

	1列目	2列目	3列目	4列目	5列目	介護者
QRコード種別	対象者	お薬1	お薬2	お薬3	お薬4	介護者
QRコードID	02	01	04	05		31
印刷サイズ	100%	100%	100%	100%	100%	100%
印刷段数	1段					

対象者 名前設定

対象者 名前ファイル（パソコンの名前ファイルを読み取ります）

名前を入力、もしくはカット＆ペーストで貼り付けて下さい。

ファイルの選択

ID氏名ファイル（クラウドのID氏名ファイルを読み込みます）

ID氏名ファイルの読み取り

介護者 名前設定

QRコード種別

↓

お薬1



あいとたろう

QRコードデータの内容

01 あいとたろう

↑

QRコードID

出力設定

- ・QRコード種別 : 出力するQRコード上部に表示されるQRコードの種別を選択します。
- ・QRコードID : 出力するQRコードデータのID（先頭2文字の数字）を設定します。
- ・印刷サイズ : QRコードの大きさを設定します。割合は絶対値ではなく、相対値を示します。
- ・印刷段数 : 出力するQRコードの表示段数を設定します。

対象者名入力設定

- ・対象者名前ファイルからの読み取り : 名前を改行区切りで記述したテキストファイルから読み取ります。
 - ・ID氏名ファイルからの読み取り : クラウドに保存されているID氏名ファイルから名前を取り込みます。
 - ・名前の直接入力 : Web画面に直接名前を記述します（カット＆ペーストも可）。
- ※最終行の名前には[Enter]キーを押して改行を入力して下さい。

介護者名入力設定

- ・介護者名前ファイルからの読み取り : 名前を改行区切りで記述したテキストファイルから読み取ります。
 - ・名前の直接入力 : Web画面に直接名前を記述します（カット＆ペーストも可）。
- ※最終行の名前には[Enter]キーを押して改行を入力して下さい。

QRコード作成例（新版）

ここでは、例として、クラウドに保存された ID 氏名ファイルから、対象者及びお薬 1 の QR コードと介護者用の QR コードを作成してみます。

1. 印刷段数の設定

印刷する QR コード種別が少ない場合、右余白が大きくなり、印刷のムダとなります。印刷段数を複数に設定することにより、印刷時の余白を減らすことができます。

QRコードシートの作成

薬包QRコードの印刷を行う場合は、設定を完了してから対象者名を入力して下さい。

印刷QRコード設定

印刷段数: 1段 (選択可能)

1列目

QRコード種別: 対象 (選択可能)

印刷サイズ: 100% (選択可能)

対象者 名前設定

ファイルの選択: ファイルが選択されていません

選択されたファイルの読み取り: 名前の読み取り

ID氏名ファイルの読み取り

名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。

2. QRコード種別とサイズの設定

印刷する QR コードの種類とサイズを設定します。最大 6 列（種類）の QR コードを設定することができます。QR コード種別には、「印刷しない」、「薬包（分包機で印字された QR コード）」、「対象者」、「お薬 1 ～ 4」、「食事」、「介護者」、「ユーザ定義 1 ～ 4」から選択できます。

QRコードシートの作成

薬包QRコードの印刷を行う場合は、設定を完了してから対象者名を入力して下さい。

印刷QRコード設定

印刷段数: 1段 (選択可能)

1列目

QRコード種別: 対象 (選択可能)

印刷サイズ: 100% (選択可能)

2列目

QRコード種別: お薬1 (選択可能)

印刷サイズ: 100% (選択可能)

3列目

QRコード種別: お薬2 (選択可能)

対象者 名前設定

ファイルの選択: ファイルが選択されていません

選択されたファイルの読み取り: 名前の読み取り

ID氏名ファイルの読み取り

名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。

「薬包（分包機で印字された QR コード）」を選択すると、QR コードに含める項目が表示されます。

1列目		選択されたファイルの読み取り 名前の読み取り	
QRコード種別	対象 ▼	ID氏名ファイルの読み取り	
印刷サイズ	100% ▼	名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。	
2列目		薬包の QR コードに含める内容を設定します。	
QRコード種別	薬包 ▼		
印刷サイズ	100% ▼		
日付	2025/07/22		
用法コード	朝食前 ▼ 基本 ▼		
3列目			

又、6 列名設定の下部に薬包印刷の QR コード設定画面が表示されます。

6 列目	
QRコード種別	対象 ▼
印刷サイズ	100% ▼
薬包印刷QRコード設定	
出力項目設定	☒ 対象者ID ☒ 日付 ☒ 用法コード ☐ 薬局コード ☐ 分包機コード
日付フォーマット	yyyy/mm/dd (ユヤマ) ▼
日付設定方法	カレンダーから選択 ▼
用法設定方法	お薬種別と追加設定から選択 ▼
薬局設定方法	薬局名から選択 ▼
分包機設定方法	薬局名の分包機種別から選択 ▼

出力項目設定のチェックボックスを有効にすると、列の QR コード設定に設定項目が表示されます。

2列目	
QRコード種別	薬包 ▼
日付	2025/07/22
用法コード	朝食前 ▼ 基本 ▼
薬局コード	薬局1 ▼
分包機コード	分包機1 ▼
3列目	

3. 対象者名の設定

印刷する QR コードの対象者の名前を設定します。

「対象者 名前設定」のテキストエリアに名前を入力もしくは、カット＆ペーストで貼り付けます。

印刷QRコード設定		対象者 名前設定	
印刷段数	1段	ファイルの選択 ファイルが選択されていません 選択されたファイルの読み取り 名前の読み取り	
1列目			
QRコード	対象者の名前を入力します。	ID氏名ファイルの読み取り	
印刷サイズ	100%	名前を入力するかカット＆ペーストで貼付けて下さい。	
2列目		あいとたろう あいとじろう ゆやまたろう ゆやまじろう しすてむはなこ あいとはなこ しらとりれいこ やまだたろう きしだふみお	
QRコード種別	お薬1		
印刷サイズ	100%		
3列目			

QRコード種別で「薬包」が設定されている場合「、」（カンマ）区切りで名前の前に ID 情報を付けて入力します。

印刷QRコード設定		対象者 名前設定	
印刷段数	1段	ファイルの選択 ファイルが選択されていません 選択されたファイルの読み取り 名前の読み取り	
1列目			
QRコード種別	対象	ID氏名ファイルの読み取り	
印刷サイズ	100%	名前を入力するかカット＆ペーストで貼付けて下さい。	
2列目		0000000111, あいとたろう 0000000112, あいとじろう 0000000113, ゆやまたろう 0000000114, ゆやまじろう 0000000115, しすてむはなこ 0000000116, あいとはなこ 0000000117, しらとりれいこ 0000000118, やまだたろう 0000000119, きしだふみお	
QRコード種別	薬包		
印刷サイズ	100%		
日付	yyyy/mm/dd		
用法コード	朝食前 基本		
3列目			


※QRコード種別に「薬包」が設定された状態で、ID 情報を付けずに名前だけ入力した場合、ID が設定されない QR コードが生成されます。QRコード種別に「薬包」が設定されている場合は、必ず ID 情報を入力するようにして下さい。

●パソコンに保存されたファイルからの読み取り

あらかじめ名前のリストをファイルに保存しておくことでファイルの情報を読み取ることができます。

名前リストファイルもしくは、ID 氏名 CSV ファイルから読み取ります。

- ・QRコード種別で「薬包」が設定されていない場合は、名前のみを抽出します。
- ・QRコード種別で「薬包」が設定されている場合は、ID と名前を抽出します。名前リストファイルの場合はID に「00000000」を設定します。

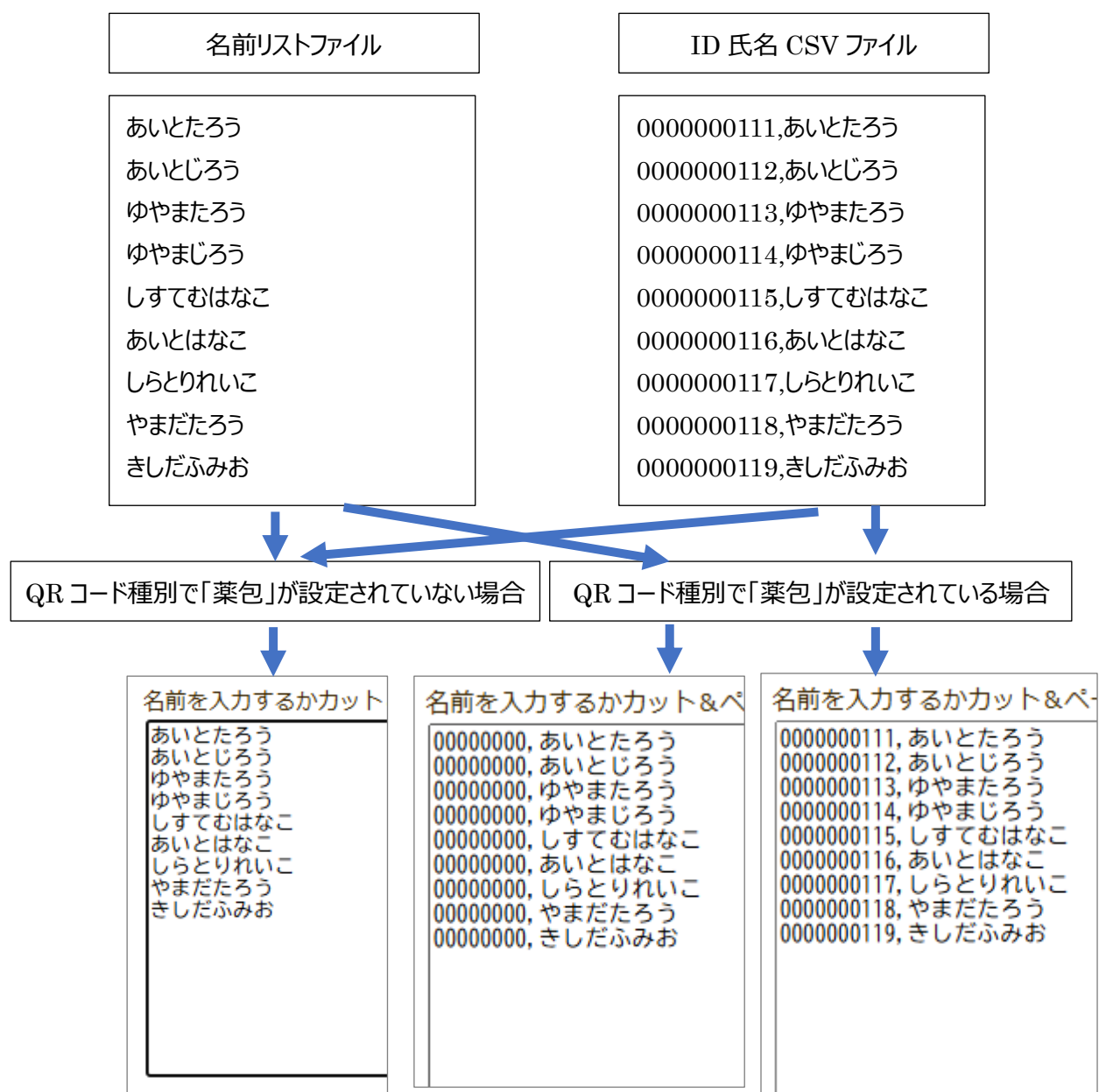

パソコンに保存されているファイルから読み出すには、**ファイルの選択** ボタンをクリックします。

QRコードシートの作成

印刷QRコード設定

印刷段数 1段

1列目

QRコード種別 対象

印刷サイズ 100%

対象者 名前設定

ファイルの選択 ファイルが選択されていません


選択されたファイルの読み取り 名前の読み取り

ID氏名ファイルの読み取り

名前を入力するかカット＆ペーストで貼付けて下さい。

[ファイルの選択] ボタンをクリックします。

ファイルの選択画面が表示されるので、名前が設定されているファイルを選択し、**開く** ボタンをクリックします。

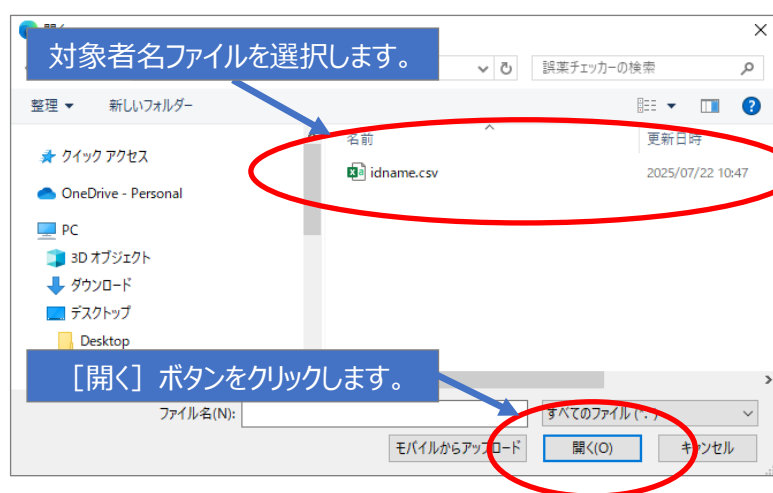

選択したファイルが表示されます。間違いなければ、**名前の読み取り** ボタンをクリックします。

QRコードシートの作成

薬包QRコードの印刷を 選択したファイル名が表示されます。

印刷QRコード設定

印刷段数 1段

1列目

QRコード種別 薬包

印刷サイズ 100%

対象者 名前設定

ファイルの選択 idname.csv

選択されたファイルの読み取り 名前の読み取り

ID氏名ファイルの読み取り

名前を入力するかカット＆ペーストで貼付けて下さい。

[名前の読み取り] ボタンをクリックします。

QRコード種別で「薬包」が設定されていない場合は、ファイルから読み取った名前が表示されます。

印刷QRコード設定		対象者 名前設定
印刷段数	1段	ファイルの選択 ファイルが選択されていません 選択されたファイルの読み取り 名前の読み取り
1列目		
QRコード種別	対象	ID氏名ファイルの読み取り
印刷サイズ	100%	名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。
2列目		あいとたろう あいとじろう ゆやまたろう ゆやまじろう しすてむはなこ あいとはなこ しらとりれいこ やまだたろう きしだふみお
QRコード種別	お薬1	
印刷サイズ	100%	
3列目		

ファイルから読み取った名前が表示されます。

QRコード種別で「薬包」が設定されている場合は、ファイルから読み取った ID と名前が表示されます。

印刷QRコード設定		対象者 名前設定
印刷段数	1段	ファイルの選択 ファイルが選択されていません 選択されたファイルの読み取り 名前の読み取り
1列目		
QRコード種別	対象	ID氏名ファイルの読み取り
印刷サイズ	100%	名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。
2列目		0000000111, あいとたろう 0000000112, あいとじろう 0000000113, ゆやまたろう 0000000114, ゆやまじろう 0000000115, しすてむはなこ 0000000116, あいとはなこ 0000000117, しらとりれいこ 0000000118, やまだたろう 0000000119, きしだふみお
QRコード種別	薬包	
印刷サイズ	100%	
日付	yyyy/mm/dd	
用法コード	朝食前 ▼ 基本 ▼	
3列目		

ファイルから読み取った名前が ID 付きで表示されます。

●クラウドにアップロード（保存）された ID 氏名ファイルからの読み取り

クラウドにアップロードした ID 氏名ファイルやクラウドで編集保存した ID 氏名ファイルの情報を読み取ることができます。クラウドの ID 氏名 CSV ファイルから読み出すには、**ID 氏名ファイルの読み取り** ボタンをクリックします。

QRコードシートの作成

薬包QRコードの印刷を行う場合は、設定を完了してから対象者名を入力して下さい。

印刷QRコード設定		対象者 名前設定	
1列目		ファイルの選択	ファイルが選択されていません
QRコード種別	対象 ▼	選択されたファイルの読み取り	名前の読み取り
印刷サイズ	100% ▼	ID氏名ファイルの読み取り	
		名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。	

【ID 氏名ファイルの読み取り】 ボタンをクリックします。

ID 氏名ファイルの選択画面が表示されるので、取り込む ID 氏名ファイルを選択して【CSV ファイルの読み出し】 ボタンをクリックします。

名前を取り込む ID 氏名ファイルを選択します。

QRコード作成

No.	ID氏名ファイル名	CSV読取
1	id_name.csv	☒
2	id_name_2.csv	☐
3	id_name_3.csv	☐

前画面に戻る

CSVファイルの読み出し

【CSV ファイルの読み出し】 ボタンをクリックします。

QRコード種別で「薬包」が設定されていない場合は、ファイルから読み取った名前が表示されます。

印刷QRコード設定		対象者 名前設定	
印刷段数	1段	ファイルの選択	ファイルが選択されていません
		選択されたファイルの読み取り	名前の読み取り
QRコード種別	対象	ID氏名ファイルの読み取り	
印刷サイズ	100%	名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。	
2列目		あいとたろう あいとじろう ゆやまたろう ゆやまじろう しすてむはなこ あいとはなこ しらとりれいこ やまだたろう きしだふみお	
QRコード種別	お薬1		
印刷サイズ	100%		
3列目			

ID 氏名ファイルから取り込んだ名前が表示されます。

QRコード種別で「薬包」が設定されている場合は、ファイルから読み取った ID と名前が表示されます。

印刷QRコード設定		対象者 名前設定	
印刷段数	1段	ファイルの選択	ファイルが選択されていません
		選択されたファイルの読み取り	名前の読み取り
QRコード種別	対象	ID氏名ファイルの読み取り	
印刷サイズ	100%	名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。	
2列目		0000000111, あいとたろう 0000000112, あいとじろう 0000000113, ゆやまたろう 0000000114, ゆやまじろう 0000000115, しすてむはなこ 0000000116, あいとはなこ 0000000117, しらとりれいこ 0000000118, やまだたろう 0000000119, きしだふみお	
QRコード種別	薬包		
印刷サイズ	100%		
日付	yyyy/mm/dd		
用法コード	朝食前 基本		
3列目			

ID 氏名ファイルから取り込んだ名前が ID 付きで表示されます。

4. 介護者名の設定

QRコード種別で「介護者」が設定されている場合、介護者のQRコードの名前を設定します。
「介護者 名前設定」のテキストエリアに名前を入力もしくは、カッド&ペーストで貼り付けます。

The screenshot shows the '介護者 名前設定' (Nurse Name Setting) section. It includes a 'ファイルの選択' (Select File) button and a '名前を読み取り' (Load Name) button. Below these, there is a text input area where names are entered. A red circle highlights this area, and a blue callout points to it with the text '介護者の名前を入力します。' (Enter the nurse's name).

●パソコンに保存されたファイルからの読み取り

あらかじめ介護者の名前のリストをファイルに保存しておくことでファイルの情報を読み取ることができます。
パソコンに保存されているファイルから読み出すには、**ファイルの選択** ボタンをクリックします。

The screenshot shows the '介護者 名前設定' (Nurse Name Setting) section. It includes a 'ファイルの選択' (Select File) button and a '名前を読み取り' (Load Name) button. Below these, there is a text input area. A red circle highlights the 'ファイルの選択' button, and a blue callout points to it with the text '[ファイルの選択] ボタンをクリックします。' (Click the [Select File] button).

ファイルの選択画面が表示されるので、
介護者の名前が設定されているファイル
を選択し、 **開く** ボタンをクリックしま
す。



選択したファイルが表示されます。間違いなければ、 **名前の読み取り** ボタンをクリックします

印刷サイズ	100%	
選択したファイル名が表示されます。		
QRコード種別	お薬3	介護者 名前設定
印刷サイズ	100%	ファイルの選択 care.txt
5列目		選択されたファイルの読み取り 名前の読み取り
QRコード種別	お薬4	名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。
印刷サイズ	100%	[名前の読み取り] ボタンをクリックします。
6列目		
QRコード種別	介護者	
印刷サイズ	100%	

ファイルから読み取った介護者の名前が表示されます

印刷サイズ	100%	
4列目		
QRコード種別	お薬3	介護者 名前設定
印刷サイズ	100%	ファイルの選択 ファイルが選択されていません
5列目		選択されたファイルの読み取り 名前の読み取り
QRコード種別	お薬4	名前を入力するかカット&ペーストで貼付けて下さい。
印刷サイズ	100%	かいごし ますよ かいご はなこ かい こたろう
QRコード種別	介護者	
印刷サイズ	100%	

介護者リストファイルから取り込んだ名前が表示されます。

5. QRコードシート確認イメージの表示

全ての設定が完了したら、**QRコードシートの作成** ボタンをクリックします。

QRコード種別	お薬4	かいご はなこ かい こたろう
印刷サイズ	100%	
6 列目		
QRコード種別	介護者	
印刷サイズ	100%	
出力項目設定	☒ 対象者ID ☒ 日付 ☒ 用法コード ☐ 薬局コード ☐ 分包機コード	
日付フォーマット	yyyy/mm/dd (ユヤマ)	
日付設定方法	カレンダーから選択	
用法設定方法	お薬種別と追加設定から選択	
薬局設定方法	薬局名から選択	
	薬局名の分包機種別から選択	
QRコードシートの作成		

QRコードシート印刷画面の確認イメージが表示されます。

QRコードシート確認イメージ

印刷画面の確認イメージです。
印刷用の画面は、『印刷画面の表示』ボタンをクリックして下さい。

印刷画面の表示
(別TABで開きます)

[印刷画面の表示] ボタンをクリックします。

名前	対象	薬包	お薬2	お薬3	お薬4	介護者
あいとたろう	対象  あいとたろう	薬包  あいとたろう 2025/07/23 朝食前-基本	お薬2  あいとたろう	お薬3  あいとたろう	お薬4  あいとたろう	介護者  かいごし ます よ
あいとじろう	対象  あいとじろう	薬包  あいとじろう 2025/07/23	お薬2  あいとじろう	お薬3  あいとじろう	お薬4  あいとじろう	介護者  かいご はなこ

出力する名前や段組数を確認します。問題なければ [印刷画面の表示] ボタンをクリックします。ブラウザの別タブに A4 シール台紙用の印刷画面が表示されます。

QRコード作成例（旧版）

ここでは、例として、クラウドに保存された ID 氏名ファイルから、対象者及びお薬 1 の QR コードと介護者用の QR コードを作成してみます。

出力設定で 1 列目に対象者の QR コード、2 列目にお薬 1 の QR コード、3 列目に介護者の QR コードを出力します。又出力する QR コードが 3 種類しかないの、シール台紙を有効に使うため、2 段組にします。

	1列目	2列目	3列目	4列目	5列目	介護者
QRコード種別	対象者 ▼	お薬 1 ▼	印刷しない ▼	印刷しない ▼	印刷しない ▼	介護者 ▼
QRコードID	02	01	03	04	05	31
印刷サイズ	100% ▼	100% ▼	100% ▼	100% ▼	100% ▼	100% ▼
印刷段数	2段 + 介護者 ▼					

出力する対象者の名前を設定します。ここでは、クラウドに保存された ID 氏名ファイルから対象者の名前を取り込みます。対象者名入力設定の「ID 氏名ファイルの読み取り」ボタンをクリックします。

対象者 名前設定

対象者 名前ファイル（パソコンの名前ファイルを読み取ります）

ファイルの選択 ファイルが選択されていません 名前の読み取り

ID氏名ファイル（クラウドのID氏名ファイルを読み込みます）

ID氏名ファイルの読み取り

名前を入力、もしくはカット＆ペーストで貼り付けて下さい。

ID 氏名ファイルの選択画面が表示されるので、取り込む ID 氏名ファイルを選択して [CSV ファイルの読み出し] ボタンをクリックします。

名前を取り込む ID 氏名ファイルを選択します。

QRコード作成

No.	ID氏名ファイル名	CSV読取
1	id_name.csv	☒
2	id_name_2.csv	☐
3	id_name_3.csv	☐

前画面に戻る **CSVファイルの読み出し**

[CSV ファイルの読み出し] ボタンをクリックします。

ID 氏名ファイルから取り込んだ名前がテキストエリアに表示されます。追加したい名前があれば、テキストエリアに追加します。**※追加した最後の名前には必ず改行キーを押下して下さい。**

対象者 名前設定

対象者 名前ファイル（パソコンの名前ファイルを読み取ります）

ファイルの選択 ファイルが選択されていません **名前の読み取り**

ID氏名ファイル(クラウドのID氏名ファイルを読み込みます)

ID氏名ファイルの読み取り

名前を入力、もしくはカット＆ペーストで貼り付けて下さい。

ほげほげたろう
あいとたろう
あいとじろう
ゆやまたろう
ゆやまじろう
しすてむはなこ
あいとはなこ
しらとりれいこ
やまだたろう
ざしだふみお

ID 氏名ファイルから取り込んだ名前が表示されます。

QRコードシート作成

介護者名入力設定で介護者の名前を入力します。パソコン保存されたテキストファイルを選択して名前を読み取りことも可能です。

ここでは、介護者名入力設定のテキストエリアに介護者の名前を入力します。

※最後の名前には必ず改行キーを押下して下さい。

QRコードシート印刷画面の確認イメージが表示されます。出力する名前や段組数を確認します。問題なければ「印刷画面の表示」ボタンをクリックします。





QRコードシートの表示ボタンをクリックします。

名前	対象者	お薬 1	介護者	名前	対象者	お薬 1	介護者
ほげほげたろう	対象者 QRコード ほげほげたろう	お薬 1 QRコード ほげほげたろう	介護者 QRコード かいごしますよ	しすてむはなこ	対象者 QRコード しすてむはなこ	お薬 1 QRコード しすてむはなこ	介護者 QRコード かいごしますよ
あいとたろう	対象者 QRコード あいとたろう	お薬 1 QRコード あいとたろう	介護者 QRコード かいごたろう	あいとはなこ	対象者 QRコード あいとはなこ	お薬 1 QRコード あいとはなこ	介護者 QRコード かいごたろう
あいとじろう	対象者 QRコード あいとじろう	お薬 1 QRコード あいとじろう	介護者 QRコード かいごじろう	しらとりれいこ	対象者 QRコード しらとりれいこ	お薬 1 QRコード しらとりれいこ	介護者 QRコード かいごじろう

QRコードの印刷

〔印刷画面の表示〕 ボタンをクリックすると、ブラウザの別タブに A4 シール台紙用の印刷画面が表示されます。
 左上の〔このページを印刷する〕 ボタンをクリックすると、ブラウザの印刷設定画面が表示されるので、プリンタでシール台紙等に印刷を行います。

〔このページを印刷する〕 ボタンをクリックします。

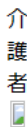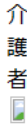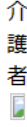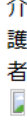このページを印刷する					
対象者  ほげほげたろう	お薬 1  ほげほげたろう	介護者  かいごしますよ	対象者  しすてむはなこ	お薬 1  しすてむはなこ	介護者 
対象者  あいとたろう	お薬 1  あいとたろう	介護者  かいごたろう	対象者  あいとはなこ	お薬 1  あいとはなこ	介護者 
対象者  あいとじろう	お薬 1  あいとじろう	介護者 	対象者  しらとりれいこ	お薬 1  しらとりれいこ	介護者 
対象者  ゆやまたろう	お薬 1  ゆやまたろう	介護者 	対象者  やまだたろう	お薬 1  やまだたろう	介護者 
対象者 	お薬 1 	介護者 	対象者 	お薬 1 	介護者 

システム設定

パスワードの変更や CSV ファイルのアップロードを行う事ができます。

システム設定画面

システム全体に関する設定を行います。

The screenshot shows a web interface for 'システム設定' (System Settings). It has a title bar at the top. Below it, there are two main sections, each with a red circled number and a blue header bar. Section ① is 'ユーザ情報' (User Information) with the text 'ユーザ情報を表示します。' (Display user information.) and a button labeled 'ユーザ情報表示'. Section ② is 'パスワード変更' (Password Change) with the text 'ログインパスワードを変更します。' (Change login password.) and a button labeled 'パスワード変更'.

システム設定	
①	ユーザ情報 ユーザ情報を表示します。 ユーザ情報表示
②	パスワード変更 ログインパスワードを変更します。 パスワード変更

①パスワード変更

ユーザ登録情報を表示します。

②パスワード変更

このボタンは無効です。CSV ファイルのアップロードは、『CSV ファイル管理』で行います。

ユーザ情報

ユーザ登録情報を表示します。

ユーザ登録情報	
項目	内容
会社名	株式会社アイトシステム ①
表題	デモ用（社外営業用） ②
顔認証オプション	有効 ③
クラウドログインID	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ④
現在の有効期限	2025年03月31日 23時59分59秒 ⑤
現在のシリアルコード	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ⑥
更新フラグ	無効 ⑦
更新後の有効期限	更新フラグがセットされていません ⑧
更新後のシリアルコード	更新フラグがセットされていません ⑨

前画面に戻る

①登録されたユーザ会社名

登録されたユーザの会社名を表示します。

②表題

登録されたユーザの表題を表示します。

③顔認証オプション

顔認証オプションの適用状況を表示します。

④クラウドログイン ID

クラウドシステムのログイン ID を表示します。

⑤現在の有効期限

現在利用しているシステムの有効期限を表示します。

⑥現在のシリアルコード

端末を利用する際に入力するシリアルコードを表示します。

⑦更新フラグ

現在の契約が更新済かを示します。

⑧更新後の有効期限

更新後のシステムの有効期限を表示します。

⑨更新後のシリアルコード

端末を利用する際に入力するシリアルコードを表示します。端末の更新ボタン押下で更新可能です。

パスワード変更

ログインパスワードを変更します。

システム設定

パスワード変更

ユーザID	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ①
パスワード(半角英数字8文字以上)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ②



前画面に戻る パスワード変更確認

①ユーザ ID は変更できません。

②パスワードには半角英数字 8 文字以上を設定して下さい。

ユーザ情報

ユーザ登録情報を表示します。

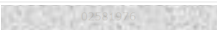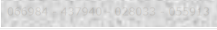ユーザ登録情報	
項目	内容
会社名	株式会社イトシステム
表題	デモ用（社外営業用）
顔認証オプション	有効
クラウドログインID	
現在の有効期限	2025年03月31日 23時59分59秒
現在のシリアルコード	
更新フラグ	無効
更新後の有効期限	更新フラグがセットされていません
更新後のシリアルコード	更新フラグがセットされていません

[前画面に戻る](#)

パスワード変更

ログインパスワードを変更します。

システム設定

パスワード変更


ユーザID	 ①
パスワード(半角英数字8文字以上)	 ②


[前画面に戻る](#)
[パスワード変更確認](#)

①ユーザID は変更できません。

②パスワードには半角英数字 8 文字以上を設定して下さい。

✕E





● **アイトシステムのホームページ** <http://www.aitosys.com>

各種製品情報、サポート案内等の情報を提供しております。

● **製品に関するご質問・ご相談**

製品に関するご質問・ご相談に電話お答えします。

【電話番号】0800-200-2790（通話料無料）

上記電話番号を利用できない場合や携帯電話等からは、0773-45-3166に連絡をお願いします。

※サポート受付時間：祝日を除く平日(月曜～金曜) 9時から 17 時まで

製品に関するご質問・ご相談にメールでお答えします。

【サポート専用メールアドレス】 support@aitosys.com

ご質問・ご相談の際は購入品のシリアル番号及びアプリ版数お知らせください。アプリ版数は「設定」メニューの「誤薬チェッカーについて」を参照下さい。

使用した音素材：OtoLogic(<https://otologic.jp>)

本ページの記載の情報は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承下さい。

最新の情報はアイトシステムのホームページ(<http://www.aitosys.com>)にてご確認ください。

株式会社アイトシステム 〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町 4-1-1 アミックビル 3F